



Das IQ-WELL PAX00



BENUTZERHANDBUCH

IQ-WELL PAXOO schützt den Körper vor schädlichen Umwelteinflüssen

Sehr geehrter Benutzer!

Dieses Handbuch ist für die Verwendung des **IQ-WELL PAXOO** Gerätes bestimmt.

Es erklärt die Funktionen, die verschiedenen Programme und deren Anwendung. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck unter strikter Einhaltung der Betriebsanleitung verwendet werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und befolgen Sie alle Anweisungen. Dies hilft Ihnen, eine hohe Effizienz zu erreichen und die Lebensdauer von **IQ-WELL PAXOO** zu erhöhen.

Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts geht das Recht auf Reklamation verloren, und das Risiko möglicher Konsequenzen liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

Wenn Sie Fragen zur Verwendung des Geräts haben, lesen Sie die Informationen auf der Website www.iq-well.com.

Nach der Herstellung wird das Gerät sorgfältig auf normalen Betrieb überprüft, gereinigt und mit dem Desinfektionsmittel -Aerodesin® 2000 desinfiziert.

Das IQ-WELL PAXOO Gerät ist **kein MEDIZINPRODUKT!**

Das Dokument darf nicht ohne vorherige Zustimmung von IQ-WELL Firma Ltd. geändert werden.

Im Handbuch und in der Verpackung von **IQ-WELL PAX00** werden **folgende Sicherheitszeichen** verwendet:

- CE-Kennzeichnung
- Nicht ionisierende elektromagnetische Frequenzen
- Nicht in den Hausmüll!
- Wichtige Informationen zum Gerät oder dessen Handhabung
- Vor Feuchtigkeit schützen!
- Siehe die Bedienungsanleitung.
- Zerbrechlich, vorsichtig behandeln!
- Beachten Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig.
- Ein / Aus

INHALT VERZEICHNIS

Einführung

1. Bestimmung des Gerätes

2. Wirkung – Mechanismen

3. Technische und Betriebliche Daten

3.1. Allgemeine Technische Daten

3.2. Aufbau und Funktion

3.3. Lautsprecher Einstellung mit oder ohne Akustischen Signals.

3.4. Arbeiten mit dem Gerät

4. Packungsinhalt

5. Verpackungs-Beschriftung

6. Verpackung

7. Entsorgung

8. Garantie

9. Vorbereitung für die Inbetriebnahme

9.1. Betriebseinschränkungen

9.2. Sicherheitsmaßnahmen

9.3. Inbetriebnahme

9.4. Liste möglicher Fehlfunktionen und Lösungsvorschläge

9.5. Technische Wartung

10. Verwendung des Gerätes

10.1. Programm Beschreibung

10.1.1 Programm 1 „PAX“

10.1.2 Programm 2 „ANTI-STRESS“

11. Anwendung des IQ-WELL PAX00 - Gerätes im täglichen Leben

Einführung

Gerade in der heutigen Zeit wirken vielfältige **Stressfaktoren** auf den menschlichen Organismus im alltäglichen Umfeld ein. Die menschliche Widerstandsfähigkeit hängt weitgehend davon ab, wie sie an die Umwelt angepasst wird. Dank des Anpassungsprozesses wird die Konstanz der inneren Umgebung des Organismus (Homöostase) erreicht, wenn der Organismus mit der Außenwelt interagiert.

Stress steht im engen Zusammenhang mit dem Anpassungsprozess, es ist eine unspezifische Reaktion des Körpers auf starke Reize, Stressfaktoren.

Die Bandbreite der Phänomene, die Stresstörungen verursachen ist extrem hoch.

Die Hauptrolle bei ihrem Auftreten wird den psychologischen Faktoren und den psychischen Überforderungen zugewiesen. Es können aber auch physikalische Faktoren sein - Hitze, Kälte, starke elektromagnetische Felder(5G), Verletzungen usw.

Ein mäßiger Stress, der nicht sehr lange andauert, ist hilfreich.

Wenn der Stress jedoch sehr stark, chronisch oder belastend wird, kann der Körper mit einer solchen Belastung nicht fertig werden und es kommt zu einem "Versagen der Anpassung".

Verschiedene Störungen im Körper - Kopfschmerzen, erhöhter Blutdruck, verminderte Libido, Schlaflosigkeit, schwaches Immunsystem. Dies sind die ersten Anzeichen von **Stress**, die der Körper nicht bewältigen kann. Wenn sich der Körper nicht erholt, treten verschiedene

Disharmonien auf: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Ischämie, Schlaganfall, Herzinfarkt usw.); Dysfunktion des Verdauungssystems (Dyspepsie, Reizdarm, Zwölffingerdarmgeschwüre und Magengeschwüre); Hautprobleme (Ekzem, Psoriasis); Angstzustände und depressive Störungen; Asthma; Diabetes; Fettleibigkeit; chronische Migräne; Schlaflosigkeit und viele andere Dysfunktionen. Die empfindlichsten Systeme des menschlichen Körpers sind:

Nerven-, Immun- und endokrines System.

Diese Körpersysteme reagieren auf den chronischen Stress sehr sensibel.

Mensch und Umwelt interagieren miteinander und tauschen ständig Energie und Informationen aus. Das Gleichgewicht dieser Stoffwechselprozesse bestimmt weitgehend den Körperzustand. Ein Organismus, der in natürliches Gleichgewicht und Harmonie gebracht wird, hat ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Überlebenschancen in einer modernen, sich rasch verändernden Welt.

Die Wiederherstellung und das Erreichen von Harmonie mit der Umwelt, ist die Aufgabe dieser modernen Technologie in dem **IQ-WELL PAXOO Gerät**, um eine Erholung zu erreichen und diese zu halten.

1. Bestimmung des Gerätes

Das Gerät **IQ-WELL PAXOO** schützt und stellt das Gleichgewicht wieder her, indem es die Energieinformationssystem und die Umgebung mit einem speziellen

Wellensignal des **IQ-WELL PAXOO** Generators beeinflusst.

Der eigebaute Generator produziert Frequenzen, welche die Informationsübertragung zwischen den Zellen verbessert und optimiert.

Das mobile Gerät ist klein, leicht, professionell, bequem und einfach zu bedienen. Sicher für den alltäglichen Gebrauch, um die Vitalität zu steigern, die Lebensqualität zu verbessern, den psycho-emotionalen Zustand zu aktivieren.

Das **IQ-WELL PAXOO** - Gerät ist für alle Familienmitglieder unabhängig von Alter und Geschlecht von Nutzen.

Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen negative elektromagnetische Umweltverschmutzung, stellt die Funktionsreserven wieder her und verbessert den psychoemotionalen Zustand bei allen Bioobjekten (Menschen, Tiere, Pflanzen).



Mit dem IQ-WELL PAX00 Gerät können Sie:

- Den Raum harmonisieren, um die elektromagnetische Umweltverschmutzung zu kompensieren.
- Schutz vor dem Einfluss von künstlichen elektromagnetischen Frequenzen (5G) bieten.
- Harmonisierung der Informationssysteme der menschliche Energie.
- Erhöhen die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Körpers auf Stressfaktoren
- Stressmindern durch Unterstützung von adaptiver Reaktion des Körpers.
- Durch Stress verursachten Auswirkungen beseitigen.
- Sie können eigene Leistung unterstützen, Ermüdung reduzieren, die Abwehrkräfte Präventiv erhöhen.

Das IQ-WELL PAXOO- Gerät kann verwendet werden:

- in verschiedenen Betrieben, Arbeitsgruppen zur Anpassung und Synchronisierung mit anderen Menschen, um physischen und psychischen Komfort zu unterstützen
- bei Verhandlungen und Besprechungen-es fördert das gegenseitige Verständnis, das Treffen verläuft konstruktiv
- im Arbeitsteam-verhindert Ermüdung durch übermäßige Belastung, hilft Stress abzubauen
- am Arbeitsplatz und bei anderen Belastungen - lange Arbeit am Computer, Mobiltelefon, städtischer Smog, langes Autofahren, lange Flugreisen, U-Bahn usw.

2. Wirkungsmechanismen

Die auf der Erde vorhandenen elektromagnetischen Felder können in zwei Gruppen zusammengefasst werden:

- natürliche elektromagnetische Felder der Erde, permanent auf jedes biologische Objekt einwirkend
- künstliche, die vom Menschen entwickelt worden sind (z.B.: Mobilnetz, 5 G)

Die technische Entwicklung als Folge menschlicher Aktivitäten verändert das natürliche Magnetfeld erheblich. Die Hauptquellen künstlicher elektromagnetischer Felder sind Stromleitungen, elektrische Leitungen innerhalb von Gebäuden und Bauten, elektrische Haushaltsgeräte, PCs, Fernseh- und Radiosendestationen, Satelliten-, Mobilfunk-

kommunikation (Telefone, Internet), elektrische Transportmittel und Radar-Anlagen, 5 G.

Erst im letzten halben Jahrhundert hat sich die Gesamtleistung des elektromagnetischen Feldes auf der Erde zehntausendfach erhöht. Dies ist eine der schädlichsten Umweltprobleme unserer Zeit.

Auf der Ebene der Information und der Energieeinwirkung stehen wir also unter ständigem Stress. Von Menschen verursachte elektromagnetische Felder verletzen das elektromagnetische Gleichgewicht eines Menschen und seiner Umgebung.

Die IQ-Well Geräte mit der neuen Technologie geben einen neuen Ansatz zur Gewährleistung der elektromagnetischen Sicherheit für Mensch und Tier. Dieser Ansatz basiert auf der Harmonisierung der Informationswellen Interaktion einer Person mit der Umgebung.

Lebende Organismen, ihre Organe und Zellen senden Frequenzen aus. Eigene Frequenz wird von lebenden Organismen zur Steuerung und Regulierung regenerativer und adaptiver Prozesse verwendet. Diese haben eine synchronisierende Wirkung, wodurch die Frequenzen Eigenschaft eines gesunden Organismus und der Leistung wiederhergestellt wird. Die Wirkung von Frequenzen des **IQ-WELL PAXOO Gerätes** führt zur Wiederherstellung der normalen Funktionsweise der Informationssteuerungssysteme des Körpers. Durch Schwingungen werden die Zellmembranen angeregt und temporäre Strukturen werden gebildet, die aus Proteinmolekülen bestehen. Die die Funktion von

Antennensystemen spielen und die normalen Prozesse der Zelle wiederherstellen. In diesem Fall ist die Informations- und Kontrollfunktion der Frequenzen von besonderer Bedeutung.

Es gibt eine Wiederherstellung der Autoregulation auf zellulärer Ebene, der Ausgleich von Informationswellenprozessen ist ständig in resonanter Verbindung von Zellen, Organen und Geweben. Eine solche interne Bioresonanz bestimmt das gesamte Informationsfeld eines lebenden Organismus, und eine externe Resonanz ist als Verfahren zum Korrigieren des Information Steuersystems einer Zelle wirksam.

Diese wissenschaftlichen Ideen bilden die Grundlage für die Entwicklung des **IQ-WELL PAXOO** Geräts, dessen technische Lösung auf der Verwendung eines patentierten EHF-Generators einer neuen Generation beruht.

Das IQ-WELL PAXOO -Gerät ist eine "elektronische Stimmgabel" für unsere Zellen.

3. Technische und Betriebliche Daten

3.1. Allgemeine Technische Daten.

Das Gerät wird ohne den Einsatz schädlicher Chemikalien und gemäß der technischen Dokumentation hergestellt. Bei potenziellem Nutzungsrisiko ist das Gerät als Produkt mit einer internen sicheren Stromquelle konzipiert. Der EHF-Generator ist im **IQ-WELL PAXOO** Gerät integriert.

Der Generator des Gerätes ermöglicht die Modulation in 2 Programmen.

Technische Eigenschaften des Geräts **IQ-WELL PAX00** sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1.

Nr.	Charakteristik	Beschreibung
1	Anlaufzeit des Betriebsmodus	nicht länger als 5 s.
2	Ablauf	gleichmäßig ohne Unterbrechung
3	Automatische Abschaltfunktion	nach Programmende
4	Masse	80 × 33 × 12 mm
5	Gewicht	90 g
6	Durchschnittliche Arbeitszeit der Batterie	ca.8 Monate
7	Gehäusematerial Kunststoff	Polycarbonat
8	Lufttemperatur bei Betrieb	von + 10 bis + 35 ° C
9	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	50% bei 25 ° C
10	Spannung	3,0 V
11	Stromverbrauch	ca. 30 mA
12	Leistungsstärke	100 MVA

Das Gerät wird mit einer CR 2032-Batterie geliefert.

Das Gehäuse kann mit Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Befeuchten Sie ein Tuch leicht und wischen Sie das Gerät ab. Es sind keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

3.2. Aufbau und Funktion

Das Gerät ist als Mono Block ausgeführt.

Auf der Frontseite (Abb.) befinden sich:

- Steuertaste
- LEDs zur Anzeige des jeweiligen Programms.

Auf der Rückseite (Abb.) befindet sich:

- die Batterie Abdeckung, unter der sich der Batteriefach befindet
- Si-Ge Generator Fenster
- Lautsprecher

Auf der Oberseite befindet sich eine Lasche für Aufhänge Schlaufe.



Einschalten

Durch einmal drücken der Steuertaste (EIN und AUS Taste siehe Abbildung Frontseite) wird das Gerät eingeschaltet.

Ausschalten

Durch erneutes Drücken der Steuertaste (EIN und AUS Taste siehe Abbildung Frontseite) kann das Gerät jeder Zeit ausgeschaltet werden.


Nach Beendigung des Programms wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

3.3. Lautsprecher Einstellung mit oder ohne Akustischen Signals.

Um das Gerät ohne oder mit Akustischen Signal zu verwenden, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Steuertaste so lange gedrückt bis die Programm 1 und Programm 2 (Zyklus) abläuft. Wenn wieder das Programm 1(eine Balke) erscheint, Steuer Taste loslassen.

3.4. Arbeiten mit dem Gerät


Bei einmal drücken der Steuertaste zeigt sich in der Mitte einen Balken was den Programmen 1 signalisiert.

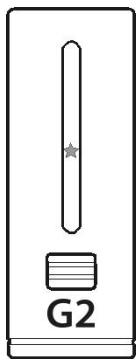

Programm 1




Bei zweimal drücken der Steuertaste zeigen sich in der Mitte zwei Balken was den Programmen 2 signalisiert.

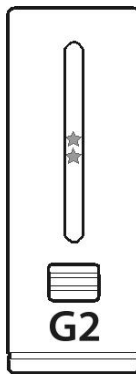

Programm 2



Wenn Sie die Taste loslassen, während des ausgewählten Programms, ist das Gerät eingeschaltet und die Frequenzen werden gesendet.

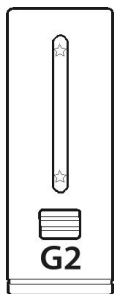

Anzeige des Betriebs Verlaufes

Ein Zeichen des Betriebs ist zwei LEDs die abwechselnd oben und unten regelmäßig blinken und die Programm Balken gehen in einen Sparmodus über.

4. Packungsinhalt

- **IQ-WELL PAXOO** - Gerät
- Benutzerhandbuch
- Reklamation Schein

5. Verpackungs-Beschriftung

Die Beschriftung ist auf der Verpackung angebracht.

- Hersteller
- Name des Gerätes
- CE-Konformitätserklärung
- Pflicht-Sicherheitszeichen

Weitere relevante Informationen sind in der Konformitätserklärung und den Richtlinien enthalten. Auf unserer Webseite.

6. Verpackung

Die Verpackung des Geräts bietet Schutz vor klimatischen und mechanischen Einflüssen. Auf der Verpackung (Box) in Deutsch und Englisch befinden sich alle erforderlichen Informationen über das Produkt.

7. Entsorgung

Das Gerät entspricht den Anforderungen der Europäischen Union hinsichtlich des Inhalts bei der Herstellung schädlicher Chemikalien.

Das Gerät muss auf eine spezielle Sammelstelle entsorgt werden.

8. Garantie

Für sämtliche Herstellungsfehler des Gerätes beträgt die Garantiefrist 12 Monate ab dem nachgewiesenen Kauf- bzw. Lieferdatum.

Beim Ausfall des Gerätes innerhalb der Garantiezeit erfolgt die Reparatur durch den Hersteller. Erfolgt der Ausfall als Folge des unsachgemäßen Betriebes, sind die Kosten für etwaige Reparaturen vom Verbraucher zu tragen.

9. Vorbereitung für die Inbetriebnahme

9.1. Betriebseinschränkungen

- Das Gerät nicht verwenden, ohne die Bedienungsanleitung zu lesen.
- Ein defektes oder beschädigtes Gerät nicht benutzen.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Nicht ins Wasser zu tauchen und nicht dem Wasser und Chemikalien auszusetzen.
- Das Gerät nicht den Stößen und Stürzen auszusetzen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern zu geben.
- Das Gerät bei einer Temperatur unter 0 ° C nicht in Betrieb zu nehmen.

9.2. Sicherheitsmaßnahmen

Bei einem Geräte Ausfall sind keine Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

9.3. Inbetriebnahme

Vor dem Einschalten des Gerätes überprüfen Sie das Gehäuse auf Schäden.

Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden.

Batterie wechseln.

Die Batterie Abdeckung nach unten schieben, die alte Batterie herausnehmen und eine neue einsetzen. Beachten Sie dabei die Polarität. Die Batterie Abdeckung wieder verschließen.

Der Zustand der Batterie wird durch die Helligkeit der LEDs angezeigt.

9.4. Liste möglicher Fehlfunktionen und Lösungsvorschläge

Mögliche Fehlfunktionen und Lösungsvorschläge sind in der Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2.

Nr.	Störung	Ursache	Abhilfe
1	Die LEDs leuchten nicht	Defekte oder entladene	Wenn das Gerät durch einen

	nach dem Einschalten	Batterie.	Batteriewechsel weiter nicht funktioniert, senden Sie es zur Reparatur!
2	Akustisches Signal fehlt	Lautsprechermodus ohne Ton gewählt.	Wählen Sie Lautsprechermodus mit Ton (Abschnitt 4). Senden Sie das Gerät zur Reparatur.
3	EIN/AUS-Schalter funktioniert nicht	Fehlfunktion im Stromkreis.	Senden Sie das Gerät zur Reparatur.
4	Das Gerät wechselt nicht in den lautlosen Modus.	Fehler im Stromkreis.	Senden Sie das Gerät zur Reparatur.
5	Die Batterie entlädt sich zu schnell (kürzer als ein Monat)	Fehler im Stromkreis.	Senden Sie das Gerät zur Reparatur.

9.5. Technische Wartung

Während der gesamten Lebensdauer des Gerätes sind keine technischen Wartungsarbeiten vorgesehen.

10. Verwendung des Gerätes

Die Millimeter Wellen, die der Si-Ge Generator sendet, stimulieren und stärken das individuelle zentrale und periphere Energie-Informations-System sowie die Energie-Zentren des Körpers. Der Energiefluss wird wiederhergestellt. Problem Zonen werden positiv beeinflusst.

Es gibt 2 Programme zur Auswahl je nach Problem Lösung. Siehe Absatz 3.4.

10.1. Programmen Beschreibung

10.1.1 Programm 1 – „PAX“ (siehe Inhalt. Pkt. 3.4.)

Dauer 30 Minuten.

Die maximale Anwende Zeit während des Tages beträgt 2 Stunden.

Der IQ-WELL PAX00 - Generator im Programm 1 ist eine EHF-Frequenzen Quelle.

Die Frequenzen strukturieren die Wassermoleküle in der Luft im geschlossenen Raum (es werden dynamische Cluster gebildet). Die dynamischen Cluster dann weiter emittieren und die Wirkung den Frequenzen verstärken-nachhaltig.

Dieser Effekt hält nach dem Abschalten des Geräts für mehrere Stunden an.

Somit wird die Harmonisierung des Raumes durchgeführt.

Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen negative elektromagnetische Umweltverschmutzung, stellt

die Funktionsreserven wieder her und verbessert den Psycho emotionalen Zustand bei alle Bioobjekten (Menschen, Tiere, Pflanzen).



Alle im Raum befindlichen Bioobjekte werden in einen Zustand der Harmonie, der Ruhe, des physischen und psychologischen Gleichgewichts und des gegenseitigen Verständnisses versetzt.

Die Wirkung des **IQ-WELL PAXOO Gerätes** erstreckt sich auf 50 Kubikmeter (mittelgroßer Raum). Legen Sie das Gerät in einem Abstand von 50 cm vom Körper weg.

Empfohlene tägliche Anwendung: 1-2 Mal am Tag, morgens und abends.

Dieses Programm kann zusätzlich bei anderen Belastungen - lange Arbeit am Computer, städtischer Smog, langes Autofahren, lange Flugreise, U-Bahn usw. verwendet werden.

10.1.2 Programm 2 ANTI-STRESS – dauert 12 Minuten


Die Wirkung im Programm Nr. 2 ist allgemein harmonisierend, beruhigend und stresshemmend. Optimiert die Reaktion auf einen aggressiven Faktor, der den Stress verursacht.

Mit dem Programm 2 können Sie:

- gegen Müdigkeit, erhöhte Reizbarkeit, Psychoemotionale Erregung, Schlafstörungen
- Stimmung Schwankungen- wirken.

Anti-Stress-Anwendungen:

Es wird empfohlen, das **IQ-WELL PAXOO** Gerät mit der Generatorseite am Handgelenk (Innenseite, in der Mitte der linken Handfläche) auflegen oder mit langsamen kreisförmigen Bewegungen den Fluss der Energie zu unterstützen.

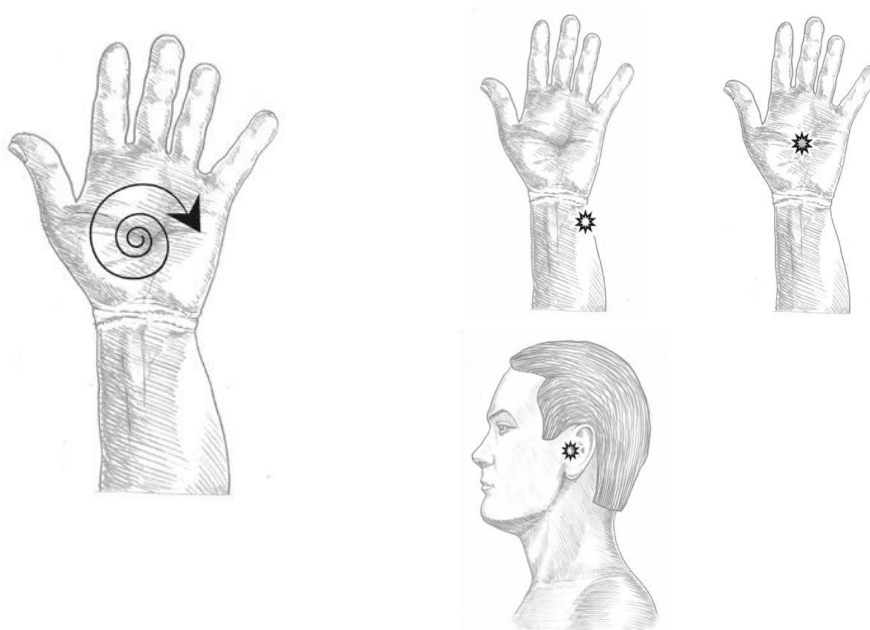

Ein guter beruhigender und schlaffördernder Effekt ist die Anwendung des Gerätes mit der Generatorseite im Bereich der Ohrmuschel (vor dem Ohr).

Einwirkzeit in einer Zone - 12 Min.

11. Anwendung des IQ-WELL PAXOO - Geräts im täglichen Leben.

Das Gerät soll systematisch eingesetzt werden.

Es ist unmöglich, sich vor den Stressfaktoren zu schützen, aber es ist möglich mit **IQ-WELL PAXOO** Gerät sich an sie anzupassen.

Täglich empfohlen:

Verwenden Sie das Programm 1

- 1-2-mal täglich um eigene Person und Raum zu Harmonisieren.
- In verschiedenen Betrieben, Arbeitsgruppen zur Anpassung und Synchronisierung mit anderen

Menschen, um physischen und psychischen Komfort zu unterstützen.

- Bei Verhandlungen und Besprechungen-es fördert das gegenseitige Verständnis, das Treffen verläuft konstruktiv.
- Am Arbeitsplatz- verhindert Ermüdung durch übermäßige Belastung.
- Dieses Programm kann zusätzlich bei anderen Belastungen - lange Arbeit am Computer, städtischer Smog, langes Autofahren, lange Flugreise, U-Bahn usw. verwendet werden.

Verwenden Sie das Programm 2

Bei erhöhte Reizbarkeit, gegen Müdigkeit, Schlafstörungen, Stimmung Schwankungen- entgegen zu wirken.

Bei starker Stressbelastung zusätzlich die Antistress Anwendungen. Siehe Kapitel 10.1.

Zur Steigerung der Gesamtleistung des Geräts wird empfohlen nach einer dreiwöchigen Anwendung eine Woche Pause zu machen.

FAZIT & RECHTLICHE HINWEISE

Millimeter-Wellen-Frequenzen können Ihrem Körper helfen, sich vor schädlichen Einflüssen zu schützen, heben die inneren Ressourcen des Körpers und können Ihre Fähigkeit zur Regeneration beschleunigen. Die Anwendungen werden als Begleitende Unterstützung der Basis -Therapien empfohlen.



Die Wirkungsweise von Lebenswellen überzeugt uns als chemiefreie Alternative einer schnellen Hilfe.

IQ-WELL PAXOO für Tiere

Das Gerät IQ-WELL PAXOO schützt unsere Vierbeiner und stellt ihr Wir leben in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen und unseren geliebten Tieren. Wir alle wissen, dass Tiere sehr feinfühlig, im Einklang mit sich und der Natur sind. Auch wenn wir das Beste wollen, so tun wir doch etwas, da gegen sie nichts tun können. Wir bringen die Strahlen ins Haus und damit die Disharmonien verursachen. Der Elektromog, 5 G und andere Arten von Strahlungen von Menschen erfunden bereiten unseren Lieblingen ein Stress, dem sie hilflos ausgeliefert sind.

Wenn du dein Tier liebst, tu etwas für seinen Schutz. Alle Tiere, die ein Halsband oder Geschirr haben, können Sie mit unserem Gerät schützen.

Gleichgewicht wieder her, indem es die Energieinformationssysteme und die Umgebung mit einem speziellen Wellensignal des IQ-WELL PAXOO-Generators stimuliert.



Der eigebaute Generator produziert Frequenzen, welche die Information Übertragung zwischen den Tier Körperzellen verbessern und optimieren.

Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen negative Einflüsse, stellt die Funktionsreserven wieder her und verbessert den Psycho emotionalen Zustand bei Tieren.



Die IQ-Well Geräte mit der neuen Technologie geben einen neuen Ansatz zur Stärkung der Widerstandfähigkeit des Vierbeiners.

Dieser Ansatz basiert auf der Harmonisierung der Informationswelleninteraktion eines Bioobjektes mit der Umgebung.



Verwendung des Gerätes

Die Millimeter Wellen, die der Si-Ge Generator sendet, stimulieren und stärken das individuelle zentrale und periphere Energie-Informationssystem sowie die Energie-Zentren der Bioobjekte. Der Energiefluss wird wiederhergestellt. Problem Zonen werden positiv beeinflusst.

Es gibt 2 Modus zur Auswahl.

MODUS HARMONIE.

Dieser Modus wurde entwickelt, um Vierbeiner vor Umweltschäden zu schützen, indem die Reaktionen optimiert werden. Es erhöht die allgemeine **Anpassungsfähigkeit** und **Stressresistenz** eines lebenden Organismus. Es kann zur schnelleren **Genesung** nach einem harten Training oder Wettbewerb sowie einer Disharmonie angewendet

werden.

Präventiv kann man es zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten im Zuchtbetrieb anwenden.

Der Modus Harmonie wird 1 bis 3 Mal am Tag angewendet. Das Gerät befindet sich dabei in einem Abstand von 30-50 cm vom Tier. In einem Raum ca. 20 Quadratmeter groß. Wenn Sie in einem größeren Raum arbeiten müssen, schalten Sie das Gerät ein paarmal an verschiedenen Stellen im Raum ein.

Modus Harmonie kann man zur Prävention von Infektionskrankheiten oder während einer Epidemie anwenden. Die Anwendungszeit sollte 14 Tage- 3 Mal am Tag dauern.

MODUS ANTISTRESS

Wir alle wissen, dass Tiere sehr feinfühlig, im Einklang mit sich und der Natur sind..

Dieser Modus ist gegen alle Art von Stress bei Tieren mit Überlastung, Reizbarkeit und psychoemotionaler Unruhe bestimmt. Er fördert eine adäquate Reaktion des Tieres auf äußere Reize.

Der Antistress Modus wird verwendet, um stressbedingte Schäden des Herz-Kreislauf-Systems, des Verdauungstrakts sowie des zentralen und peripheren Nervensystems zu verhindern.

ANWENDUNG.

Der Antistress-Modus wird sowohl für Kontakt als auch für die kontaktlose Verwendung empfohlen. Für die kontaktlose Anwendung befindet sich das Gerät in der Nähe vom Kopf des Tieres, an einem speziellen Seil aufgehängt. Wenn das Tier nervös ist und ohne Aufsicht bleibt, wird empfohlen, das Gerät für 10-15 Minuten einzuschalten. bevor Sie den Raum verlassen.

Der Antistress Modus wird auch für die Anwendung während der Dressur empfohlen. Erfolgreich wird es gegen Angst vor Feuerwerkskörpern und Schüssen eingesetzt.

Bei der Kontaktanwendung wird der Brustbeinbereich 12 Minuten lang behandelt. Entweder durch auflegen oder umhängen des Gerätes.

Dieser Modus kann man bei akutem Stress als auch vorbeugend bei ängstlichen Tieren eingesetzt werden.

Aus rechtlichen Gründen geben wir folgenden Hinweis: In Europa sind MMW Geräte von der Schulmedizin nicht anerkannt. Zahlreiche medizinische Studien in russischen Uni-Kliniken zeigen allerdings erstaunliche Ergebnisse. Viele Anwender in Europa gehen diesen Alternativen Weg.



**PAXOO schützt den Körper vor schädlichen
Einflüssen, weckt die internen menschlichen
Ressourcen und hilft, sich zu erholen.**

